

0459



Prodotto per:

Reflexonic, LLC
5504 Skye Avenue
Chambersburg, PA 17202 USA
Telefono: +1 717.267.1155 | Fax: + 1 717.267.0364
E-mail: customerservice@reflexonic.com
www.Reflexonic.com



Sistema di stimolazione vibratoria del pene
Viberec[®]
MANUALE D'USO
Prodotto negli USA

EC	REP	EMERGO EUROPE Molenstraat 15 2513 BH, L'Aia Paesi Bassi Phone: +31.70.345.8570 Fax: +31.70.346.7299
----	-----	--

Indicazioni per l'uso

Il dispositivo di stimolazione vibratoria del pene Viberec[®] è un dispositivo medico manuale indicato per provocare erezioni in uomini con disfunzione erettile e per provocare l'eiaculazione in uomini con lesioni del midollo spinale.

ATTENZIONE -

La legislazione federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo a un medico o dietro prescrizione medica.

INDICE

Introduzione	3
Garanzia	3
Batteria	4
Precauzioni per un utilizzo sicuro	5
Istruzioni operative Viberec [®]	6-7
Istruzioni per l'uso - Uomini con lesioni del midollo spinale	8-9
Istruzioni per l'uso - Erezione e rigidità del pene	10-13
Istruzioni per la pulizia	14
Rimozione e sostituzione dei cuscinetti	14
Assistenza clienti e informazioni di recapito	15
Specifiche del prodotto Viberec [®]	15
Tabella dei simboli	16

**LEGGERE PER INTERO QUESTO MANUALE
D'USO PER UN UTILIZZO CORRETTO E
RISULTATI OTTIMALI.**



Siamo su YouTube sotto "Viberec".

INTRODUZIONE

Il dispositivo di stimolazione vibratoria del pene **Viberec[®]** è un vibratore terapeutico manuale fabbricato negli USA, indicato per provocare l'erezione del pene in casi di disfunzione erettile e per provocare l'eiaculazione. Viberec ha acquisito la certificazione CE ed è stato approvato dalla FDA statunitense come dispositivo medico di Classe II.

La stimolazione vibratoria del pene è un metodo di stimolazione nervosa facile e non invasivo, simile al coito o alla stimolazione manuale, che aiuta ad attivare i recettori nervosi (antenne nervose) situati sulla superficie cutanea del pene. Questi nervi comunicano con i centri sessuali del cervello e del midollo spinale. L'attivazione e l'iniziazione dei riflessi sessuali (pudendocavernosi e bulbocavernosi) da parte del dispositivo Viberec contribuiscono a iniziare l'erezione del pene, la rigidità, l'orgasmo e l'eiaculazione. Questo dispositivo è stato progettato da urologi specializzati nella disfunzione sessuale, affinché gli uomini traggano vantaggio da questa modalità facilmente e a proprio agio nella propria abitazione.

Questo manuale d'uso contiene informazioni e istruzioni che devono essere seguite per garantire il funzionamento sicuro del dispositivo **Viberec[®]**. Contiene, inoltre, avvertenze e precauzioni da tenere sempre presenti.

ATTENZIONE - OCCORRE ATTENERSI A TUTTE LE INDICAZIONI FORNITE IN QUESTO MANUALE SEMPRE.

L'utilizzo di questo dispositivo è soggetto esclusivamente a prescrizione medica.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

GARANZIA

Il produttore garantisce il **dispositivo Viberec[®]** a fronte di guasti meccanici ed elettrici causati da parti e/o lavorazione difettose per 12 mesi a partire dalla data di acquisto.

La garanzia non copre danni causati da incidenti, manomissioni o alterazioni del prodotto di qualsiasi tipo, né dovuti a manipolazione, pulizia o uso inadeguati del prodotto o alla mancata osservanza delle istruzioni del manuale d'uso. La responsabilità del produttore si limita alla sostituzione di un prodotto difettoso.

La società Reflexonic non si riterrà responsabile per danni incidentali o consequenziali di qualsiasi tipo, diretti o indiretti.

BATTERIA

La batteria del **Viberec[®]** non è stata caricata prima della consegna.

Una batteria completamente scarica impiegherà circa 6-8 ore per ricaricarsi completamente. L'indicatore di carica rosso si spegnerà una volta completato il ciclo di carica.

Per assicurarsi che il Viberec[®] sia sempre pronto per l'uso, si raccomanda di ricaricare la batteria dopo l'uso.

Una batteria completamente carica consentirà circa 30 minuti di vibrazione a un'impostazione media di frequenza.

Quando è completamente scarica, farla ricaricare per 6-8 ore. Assicurarsi che il vibratore sia spento prima di ricaricarlo.

Usare solo il caricatore fornito con il vibratore. Caricare il Viberec mentre sta appoggiato di lato, poiché in posizione verticale potrebbe accendersi.

NON TENTARE di usare il dispositivo mentre è sotto carica.

AVVERTENZA -

Evitare le interferenze elettromagnetiche durante l'utilizzo del dispositivo

Smaltimento della batteria

La batteria ricaricabile nel vibratore contiene nichel-metal idruro (NiMH).

Al pari di altre batterie di questo tipo, se bruciate o forate, possono espellere materiale tossico che può causare lesioni.

Il dispositivo non contiene una fonte di alimentazione interna che si può sostituire. Le batterie non sono sostituibili. Se si desidera smaltire il dispositivo, non smontare i componenti. Eliminarlo intero.

Consultare le autorità locali preposte allo smaltimento dei rifiuti solidi per dettagli relativi alle opzioni di riciclaggio e smaltimento adeguati. Negli Stati Uniti, telefonare al numero verde 1.800.8.BATTERY o visitare il sito web di Battery Recycling Corporation all'indirizzo <http://www.call2recycle.org/>

La vita delle batterie NiMH dipende in larga misura dalla cura con cui vengono trattate. Se viene mantenuta in modo adeguato, la batteria può resistere fino a 500 cicli di carica/scarica prima di ridurre la capacità all'80%. Non superare le temperature ambiente consentite durante la ricarica, il funzionamento o la conservazione.

AVVERTENZA

Su questo dispositivo non è consentita alcuna modifica. Non modificare questo dispositivo senza l'autorizzazione del produttore. Se si modifica questo dispositivo, occorre condurre adeguati test e ispezioni per garantire che si possa continuare a usarlo in modo sicuro.

PRECAUZIONI PER UN USO SICURO



AVVERTENZA - Ogni dispositivo Viberecct deve essere usato da una sola persona. Non deve mai essere condiviso con un'altra persona, poiché ciò aumenta il rischio di malattie contagiose o trasmesse sessualmente. Trattare il dispositivo alla pari del proprio spazzolino da denti o di un altro prodotto di igiene personale.

AVVERTENZA - Questo dispositivo non deve essere usato su aree gonfie o infiammate o eruzioni cutanee. Non lo utilizzare in presenza di un dolore inspiegabile al polpaccio. Consultare il proprio medico.

AVVERTENZA - Questo dispositivo non deve essere usato per più di 10 minuti al giorno per evitare lesioni cutanee. Una stimolazione vibratoria eccessiva può aumentare il rischio di irritazione cutanea e intorpidimento temporaneo.

La stimolazione vibratoria può causare un trauma superficiale della cute con conseguente formazione di lividi, sanguinamento o ulcerazione superficiale. Se si verifica questa situazione, non utilizzare la vibrazione e consultare il proprio medico. Non immergere il vibratore in alcun tipo di liquido. Non usare il vibratore in bagno o in altri luoghi umidi. Se è presente una lesione del midollo spinale, la stimolazione vibratoria potrebbe produrre un episodio di disreflessia autonoma. In tal caso, occorre interrompere immediatamente la vibrazione. Consultare il proprio medico.

La disreflessia autonoma può essere causata da vari fattori quali, ad esempio, un intestino o una vescica eccessivamente distesi. Procedure che possono provocare un orgasmo o che prevedono una stimolazione vibratoria possono precipitare un episodio acuto di disreflessia autonoma.

Se è presente una lesione del midollo spinale sopra il livello T6, occorre ricevere istruzioni dettagliate dal proprio medico in relazione alla disreflessia autonoma e alle sue possibili conseguenze e valutare insieme al medico se la stimolazione vibratoria sia una forma adeguata di trattamento.

Se si è a rischio di disreflessia autonoma, si raccomanda l'utilizzo di nifedipina (un bloccante del canale del calcio), 10-20 mg, per via orale, 10-15 minuti prima dell'inizio della vibrazione e l'arresto immediato della vibrazione al momento dell'eiaculazione.


AVVERTENZA

Se dopo l'uso del dispositivo Viberecct si sviluppa un'erezione del pene che dura più di quattro ore, consultare il proprio medico o recarsi immediatamente al pronto soccorso, poiché è possibile che si tratti di **priapismo**, che è un'emergenza medica. Il priapismo è una condizione medica in cui globuli rossi scarsamente ossigenati sono rimasti intrappolati nel pene. Ciò richiede attenzione medica immediata o un intervento chirurgico urgente.

AVVERTENZA

Evitare di usare Viberecct a temperature superiori a 35 °C (95 °F).

Istruzioni per l'uso del sistema di stimolazione vibratoria del pene VIBERECT®

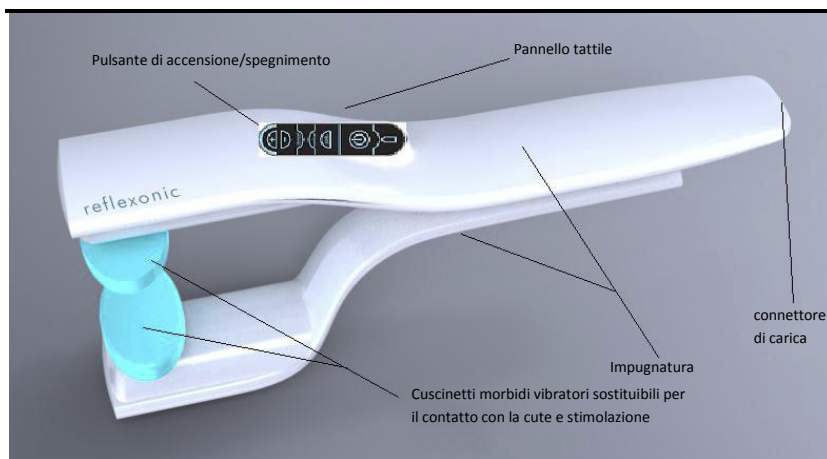

Accessori e parti staccabili

1. I cuscinetti morbidi (due inclusi) sono staccabili e sostituibili. Il numero per l'ordine dei cuscinetti morbidi è 1680024W o 1680024BK, sono forniti in coppia.
2. Caricabatteria

**(1) Pulsante ON/OFF
(accensione/ spegnimento)
sul pannello tattile**



Il dispositivo può essere acceso e spento premendo il pulsante sul pannello tattile. Tenere premuto il pulsante on/off (accensione/ spegnimento) per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

**(2) CONTROLLO DELLA
FREQUENZA**




Premere i pulsanti + o – sul pannello tattile per aumentare la frequenza da 70 Hz fino a un massimo di 110 Hz, a discrezione. Le spie LED rosse aumentano a incrementi di 5 Hz progressivamente da destra a sinistra.

(3) INDICATORE DI CARICA




Una singola spia LED rossa indica che il dispositivo Vibereect deve essere caricato. Se la spia LED rossa non si accende, il dispositivo ha alimentazione sufficiente per l'applicazione. Caricare il dispositivo. Tenere il dispositivo appoggiato sul lato, in modo che i due bracci non si uniscano per effetto della gravità.

**(4) Pulsante della
modalità del
cuscinetto e
indicatore**

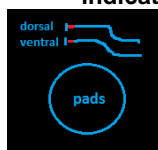

Il dispositivo prevede 3 modalità di funzionamento: 1. vibrazione solo nella parte superiore del pene (Dorsal), 2. vibrazione solo nella parte inferiore del pene (Ventral) o 3. entrambe le superfici (modalità raccomandata per ottenere la massima risposta sessuale). Le modalità possono essere cambiate facilmente mentre il dispositivo è attivo premendo il pulsante dei cuscinetti una volta, due volte o tre volte per attivare la modalità desiderata. Le spie LED indicheranno le modalità.

(5) Connettore di carica

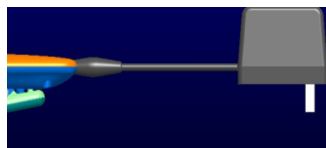

Il connettore di carica è situato sul retro del dispositivo.

ISTRUZIONI PER L'USO

LESIONE DEL MIDOLLO SPINALE

ATTENZIONE

Se la lesione del midollo spinale è al di sopra del livello T6, occorre attenersi rigorosamente alle istruzioni del medico per evitare la disreflessia autonoma.

La disreflessia autonoma viene percepita come un mal di testa pulsante e repentino, e un aumento rapido della pressione arteriosa causato dall'attivazione eccessiva del sistema nervoso autonomo. Se la lesione del midollo spinale è al di sopra del livello T6, è possibile che il corpo abbia perso la capacità di controllare automaticamente la pressione arteriosa.

Si raccomanda di eseguire almeno due procedure di vibrazione in ambiente clinico prima di usare il Viberecct nella propria abitazione.

Si raccomanda la seguente configurazione iniziale:

Frequenza: 100 Hz
Ampiezza: 2 mm (costante)

Mettersi comodi prima di accendere il dispositivo **Viberecct®**.

Seguire le istruzioni descritte nella sezione successiva, compresi gli esercizi volti a sollecitare il riflesso da stiramento pre-viberecct per 2-3 minuti prima di usare Viberecct.

Continuare con la vibrazione finché si produce l'eiaculazione o per un massimo di 3 minuti seguiti da una pausa di 1 minuto. Parlare con il proprio medico per ottenere altre raccomandazioni di configurazione.





Orientamento per tenere il dispositivo e il pene con la mano dominante

PRECAUZIONI

Non applicare la stimolazione vibratoria del pene più di una volta ogni 24 ore. In alcuni casi, si raccomanda di applicare la vibrazione una volta alla settimana per evitare l'“esaurimento” del riflesso eiaculatorio.

Determinare insieme con il medico con che frequenza occorre applicare la vibrazione.

Se si ha difficoltà a eiaculare alle configurazioni raccomandate, si può provare un'altra configurazione.

Se lo scopo di indurre l'eiaculazione è mirato al tentativo di ottenere una gravidanza, lo sperma deve essere raccolto in un apposito contenitore senza spermicida.

Per raggiungere l'erezione del pene, iniziare con un'impostazione bassa e aumentare la frequenza fino a raggiungere quella più confortevole.

ISTRUZIONI PER L'USO PASSO-PASSO DI VIBERECT®

Per provocare un'erezione del pene


Durata approssimativa della stimolazione: 3-10 minuti

PER OTTENERE UNA RISPOSTA SESSUALE OTTIMALE, È ESSENZIALE SEGUIRE LE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO RACCOMANDATE. È POSSIBILE CHE SIANO NECESSARIE VARIE SESSIONI PRIMA DI APPRENDERE COME USARE ADEGUATAMENTE IL DISPOSITIVO VIBERECT PER OTTENERE RISULTATI OTTIMALI.

Punto 1: scegliere una stanza silenziosa, privata e con poca luce nella sua abitazione. La camera da letto è il luogo ideale. Giacere sulla schiena con le ginocchia flesse. Rilassare la pelvi.

Punto 2: per ottenere i migliori risultati, si raccomanda di rilassarsi quanto più possibile e di pensare a scene o ricordi sessuali, o di usare Vibereect nell'ambito dei preliminari amorosi. **Tenere presente che è molto difficile ottenere un'erezione se si è nervosi, preoccupati o impazienti. Evitare di concentrarsi sull'utilizzo del dispositivo. Concentrarsi su pensieri di natura sessuale.**

Ricordare:

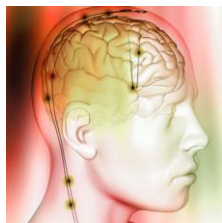

+



= Risposta sessuale

Pensieri sessuali

Stimolazione dei nervi genitali

Punto 3: esporre il pene con gli slip abbassati per evitare la compressione del flusso sanguigno. Se non si è stati circoncisi, ritirare il prepuzio per esporre il glande. La migliore posizione è quella supina nel letto con le ginocchia parzialmente flesse per rilassare i muscoli pelvici.

Punto 4: per preparare il pene per la stimolazione vibratoria, è necessario esporre le antenne nervose situate sulla superficie del pene, soprattutto sul glande.

Eseguire ora il seguente esercizio.

"Bulbocavernosus reflex".

A. Con una e entrambe le mani, tenere con delicatezza il glande tra l'indice e il pollice. Tenere solo il glande e non la corona alla sua base.



A



B1



B2

B. Tirare con delicatezza il pene nell'aria, finché raggiunge il suo limite normale, come mostrato nell'immagine B1. Tirare e rilasciare senza lasciar andare il glande. Dopo aver ripetuto varie volte questa azione ogni 2-3 secondi, si dovrebbe sentire il pene e i muscoli pelvici contrarsi molto rapidamente e resistere allo stiramento per mezzo secondo ogni volta che si tira. Non tirare mai il pene eccessivamente, tirarlo solo fino alla lunghezza normale della sua erezione.

TIRARE.....RILASCIARE.....TIRARE.....RILASCIARE....(B1-B2).

C. Questa "reazione di ritrazione" è un riflesso corporeo del tutto normale e indolore. Si chiama **riflesso bulbocavernoso**. Quando si tira con delicatezza il pene fino al suo limite, il pene si ritrae rapidamente. Questo movimento è dovuto alla contrazione riflessa dei numerosi muscoli presenti nell'area pelvica, tra cui quelli relativi alla rigidità, l'ano e il muscolo che controlla l'emissione dell'urina (sfintere). Potrebbe essere necessario ripetere questo esercizio per apprendere bene questa tecnica.



D. Una volta appresa questa tecnica, è possibile tirare con delicatezza il pene fino alla sua misura normale e rilasciarlo ripetutamente ogni 2-3 secondi per produrre questo riflesso. Non si tratta di strofinare il pene, ma di tirarlo e rilasciarlo con delicatezza. Applicare questa tecnica per 2-3 minuti (ogni 2-3 secondi). Dopo aver eseguito questo esercizio correttamente, ci si può aspettare un graduale ingrossamento del pene, soprattutto del glande, e la rigidità.

Punto 5: tenere il dispositivo nella mano dominante, come mostrato di seguito.

Si può scegliere di usare una piccola quantità di lozione o lubrificante.



Punto 6: accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione sul pannello tattile. Il dispositivo è pronto, ma non sarà prodotta alcuna vibrazione finché non si uniscono i due bracci stringendoli con la mano.

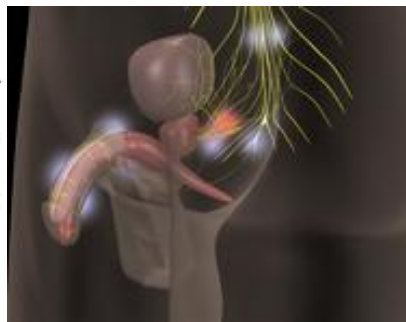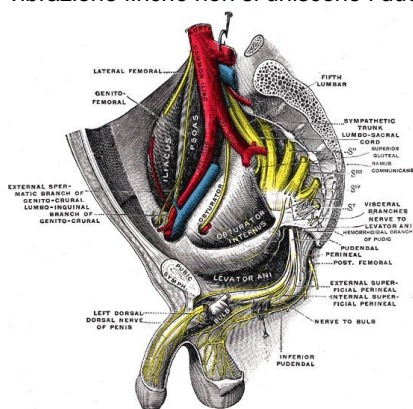

Punto 7: tenere il pene leggermente tirato dal dispositivo durante la stimolazione. Applicare pressione su entrambi i bracci del dispositivo chiudendo le dita. Il dispositivo si attiverà.



Punto 8: portare i cuscinetti vibratori a contatto con entrambi i lati della superficie del pene **allungato**. Concentrarsi sul glande. Tenere il pene leggermente allungato. Il dispositivo Vibereect stimolerà ora il pene. È possibile aumentare la pressione e la sensazione collocando la mano e la presa più vicine all'estremità vibratoria del dispositivo e premendo inoltre di più con la mano libera alla base del pene verso l'estremità vibratoria. Occorre individuare il punto sul pene dove le sensazioni sono più intense. Applicare su questo punto la vibrazione di Vibereect. Nota: non si deve mai premere eccessivamente sul dispositivo per evitare il rischio di danneggiare il dispositivo o di causare lesioni al pene.

Punto 9: durante la stimolazione della superficie del pene, si può scegliere di aumentare l'intensità della stimolazione spingendo i pulsanti di regolazione della frequenza con il pollice che sostiene il braccio superiore. Iniziare con la frequenza più bassa. È possibile anche passare alla modalità A: solo parte superiore, B: solo parte inferiore e C: entrambe.

Punto 10: se la sensazione è troppo intensa o si desidera arrestare il dispositivo immediatamente, è sufficiente allentare la presa e il dispositivo si arresterà immediatamente. Per ridurre l'intensità della stimolazione si può anche diminuire la frequenza.

Punto 11: continuare a stimolare il corpo del pene e il glande. **Concentrarsi principalmente sul glande.** Se si ha la sensazione che un'area sia particolarmente sensibile, tenere il dispositivo su quell'area per circa 3-10 minuti a seconda della risposta del proprio corpo e della situazione. **È importante rilassarsi completamente e concentrarsi su pensieri di natura sessuale. I riflessi e i percorsi sessuali non funzioneranno in un ambiente non rilassato.** Il processo impiega diversi minuti e NON è immediato. È possibile sentire il pene che si riempie lentamente di sangue diventando più rigido. Il dispositivo si aprirà gradualmente e con facilità per adattarsi all'aumento delle dimensioni del pene.

Punto 12: per disattivare il dispositivo è sufficiente spegnerlo o aprire la mano e rilasciare la presa. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi e il dispositivo si spegnerà.

Quando si raggiunge la rigidità ottimale, rilasciare la presa e mettere da parte il dispositivo. Se la rigidità è soddisfacente, si può iniziare il coito.

Nota: non tutti gli uomini potrebbero rispondere all'inizio alla stimolazione con Vibereect. È possibile che siano necessarie diverse sessioni prima che ci si senta a proprio agio con l'utilizzo del dispositivo.

Per uomini che utilizzano il dispositivo a scopo di riabilitazione, se ne raccomanda l'uso giornaliero per 7-10 minuti in un ambiente atto a potenziare il recupero della risposta sessuale.

PULIZIA

Per garantire che **Viberec[®]** sia sempre pronto per l'uso, si raccomanda di pulire i cuscinetti vibratori e l'intera superficie, e di caricare la batteria dopo ogni utilizzo.

Uso personale

Pulire la parte esterna del vibratore con una salvietta asciutta o inumidita con alcol. Non immergere il vibratore in alcun tipo di liquido.

È importante rimuovere ogni traccia di lozione o umidità dai cuscinetti e dal corpo del dispositivo dopo ogni utilizzo con una salvietta pulita asciutta e pulirli con batuffoli imbevuti di alcol.

Uso clinico

Chiunque pulisca il dispositivo deve sempre indossare guanti che non siano in lattice per protezione personale. Il dispositivo deve essere pulito immediatamente dopo ogni utilizzo.

Rimuovere entrambi i cuscinetti e gettarli. Posizionare nuovi cuscinetti dopo ogni utilizzo da parte di una persona diversa.

Pulire bene il dispositivo con una salvietta inumidita con acqua saponata, quindi con batuffoli imbevuti di alcol.

Rimozione e sostituzione dei cuscinetti Viberec[®]

Se i cuscinetti iniziano a mostrare segni di usura e/o deterioramento, sostituirli immediatamente. Controllare in particolare ① la superficie del cuscinetto per escludere la presenza di segni di usura/deterioramento e sostituirli se necessario; quindi ② controllare l'integrità dell'intero gruppo sottostante ciascun cuscinetto. Basta tirare ciascun cuscinetto, in direzione opposta al corpo del dispositivo (vedere l'immagine). Per installare i cuscinetti nuovi, incapsularli nell'apposito attacco. Il dispositivo deve essere in posizione OFF (spento) quando si sostituiscono i cuscinetti. Gettare i cuscinetti usati in un contenitore per rifiuti chiuso.



Direzione in cui tirare
per rimuovere i
cuscinetti

Cuscinetti



Cuscinetti aggiuntivi possono essere acquistati presso
www.reflexonic.com

Informazioni di recapito:

Assistenza clienti:

Customerservice@reflexonic.com (metodo raccomandato e più efficiente)

Tel.: 001.717.267.1155 9:00 – 16:30, L-V ora standard della costa orientale degli USA

N. di fax gratuito: 800.886.1470 e 717.267.0364

Reflexonic LLC

Soluzioni urologiche innovative

5504 Skye Avenue

Chambersburg, PA 17202

SISTEMA DI STIMOLAZIONE VIBRATORIA DEL PENE VIBERECT® SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Alimentatore: (Per la regione dell'UE).....SL Power (AULT) MENB1010A0903F01
con prese a muro specifiche del paese

Intervallo di frequenza (con batteria completamente carica)..... 70 - 110 Hz

Ampiezza (picco a picco) 2,0 mm






Batteria.....Ni-MH, ricaricabile 4 AA

Temperatura Evitare di usare Vibereect a temperature superiori a 35 °C (95 °F).

Conservazione Temperatura ambiente 20-25 °C (68-77 °F)

Trasportare a temperature comprese tra -17 °C e 37 °C (0 °F – 100 °F) e un'umidità relativa dell'85%

Tabella dei simboli

Simbolo	Significato
	Codice di lotto
	Numero di catalogo
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Parte applicata di tipo B. "Il dispositivo garantisce la protezione da scosse elettriche"
	Non smaltire il dispositivo in modo inadeguato (vedere a pagina 4)

Simbolo	Significato
	Attenzione
	Non usa se la confezione è danneggiata
	Produttore e data di produzione
	Fragile